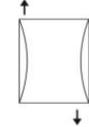


	Rutschtuch PICCOLO ONE	Rutschtuch MOBI ONE	Rutschtuch ACTIV ONE	Rutschtuch FLEXI ONE	Rutschtuch JUMBO ONE	Rutschtuch TRANSFER ONE	
Einwegmaterial bis zu 8 Wochen anwendbar				flexibel faltbar			
	60 x 41 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	200 x 70 cm	
							
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Waschmaschine	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Handling							
Flüssigkeits- abweisend	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

	Rutschtuch PICCOLO	Rutschtuch MAXI	Rutschtuch MOBI	Rutschtuch ACTIV	Rutschtuch FLEXI	Rutschtuch JUMBO	Rutschtuch TRANSFER MASTER
<b>Mehrwegmaterial</b>					flexibel faltbar		
	60 x 41 cm	72 x 71 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	100 x 200 cm
							
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waschmaschine	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x
Handling							
Flüssigkeits- abweisend	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	Rutschtuch PICCLOLO EXTREME	Rutschtuch MAXI EXTREME	Rutschtuch MOBI EXTREME	Rutschtuch ACTIV EXTREME	Rutschtuch FLEXI EXTREME	Rutschtuch JUMBO EXTREME	
<b>Mehrweg- material „Alleskönner“</b>					flexibel faltbar		
	60 x 41 cm	72 x 71 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	
							
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Waschmaschine	80 x	80 x	80 x	80 x	80 x	80 x	
Handling	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Flüssigkeits- abweisend z.B. Inkontinenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Rutschtuch	PICCOLO	MAXI	MOBI	ACTIV	FLEXI	JUMBO	TRANSFER MASTER
	PICCOLO EXTREME	MAXI EXTREME	MOBI EXTREME	ACTIV EXTREME	FLEXI EXTREME	JUMBO EXTREME	
	PICCOLO ONE		MOBI ONE	ACTIV ONE	FLEXI ONE	JUMBO ONE	
<b>Masse</b>	60 x 41 cm	72 x 71 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	100 x 200 cm
<b>Skizze</b>					flexibel faltbar		
<b>Anwendungsempfehlung</b>	<p>Personen welche noch AKTIV am Lagerungsprozess teilnehmen. Fördert Rehabilitation durch Mithilfe.</p> <p>Erleichterung der Drehbewegung im Bett, Stuhl, Autositz sowie hochrutschen im Bett,</p> <p>Verbesserung Transfer Rollstuhl-Bett</p> <p>Für schwangere Frauen um einfaches Drehen im Bett zu ermöglichen bzw. zur Schmerzreduktion im Lagerungswechsel bei "PDA Anwendung" während Entbindung.</p>				<p>Flexibel faltbar, nicht zweifach vernäht wie beim JUMBO / JUMBO ONE/ JUMBO EXTREME</p> <p>hochrutschen im Bett</p> <p>Seitenlagerung im Bett</p>	<p>besseres Handling als FLEXI / FLEXI ONE / FLEXI EXTREME da zweifach vernäht</p> <p>hochrutschen im Bett</p> <p>Seitenlagerung im Bett</p> <p>Transfer Bett-Bett</p> <p>Keine störenden Kanten wie Rutschbrett</p>	<p>Transfer Bett-Bett</p> <p>Keine störenden Kanten wie beim Rutschbrett</p>